

TECNO-GAZ

NEWS

Noviembre 2016
Número 6

Información y oportunidades directamente
del fabricante al usuario

DESCUBRA NUESTRA SALA DE CIRUGÍA INTEGRADA



*Libertad de movimiento
Libertad de elección*

> P. 6

Projet KYRI: elija lo
mejor para usted y para
sus pacientes



> P. 8

KYRI CART: unidad móvil
para el instrumental
KYRI DSS: aspiración quirúrgica



> P. 10

Orion 40DS: Lámpara
quirúrgica especial para
uso odontológico



> P. 12

Smart-Trolley:
Unidades funcionales concebidas
para satisfacer sus necesidades



EN ESTE EJEMPLAR

Proyecto de esterilización Tecno-Gaz:
¡pocas empresas
como la nuestra!

4



Desfibrilador: ¿obligatorio
o no? TecnoHeart,
sencillo y seguro

15



Sedación consciente:
Nuevo circuito
Nuevas mascarillas

16



Gama de sillones
dentales Tygi

18 TYGI



¡Disfrute de nuestras
ofertas comerciales
más atractivas!

20



SMARTBLOX

14



SISTEMA
SMART BLOX
2115

Con 35 años en el mercado y de trabajo ininterrumpidos, nos hemos convertido en una "realidad global" para su clínica.



Soluciones a 360°



Tecno-Gaz, empresa líder del sector



Conocemos sus necesidades y cumplimos las expectativas

Especialistas en la solución quirúrgica integrada

KYRI

Unidad para tratamientos quirúrgicos y asistencia dental de larga duración



Tecno-Gaz

La única que ofrece innumerables soluciones completas *para la práctica dental*


Zonas funcionales: primeros auxilios



Zonas funcionales: Sedación consciente



Cirugía:
Gabinete quirúrgico polivalente

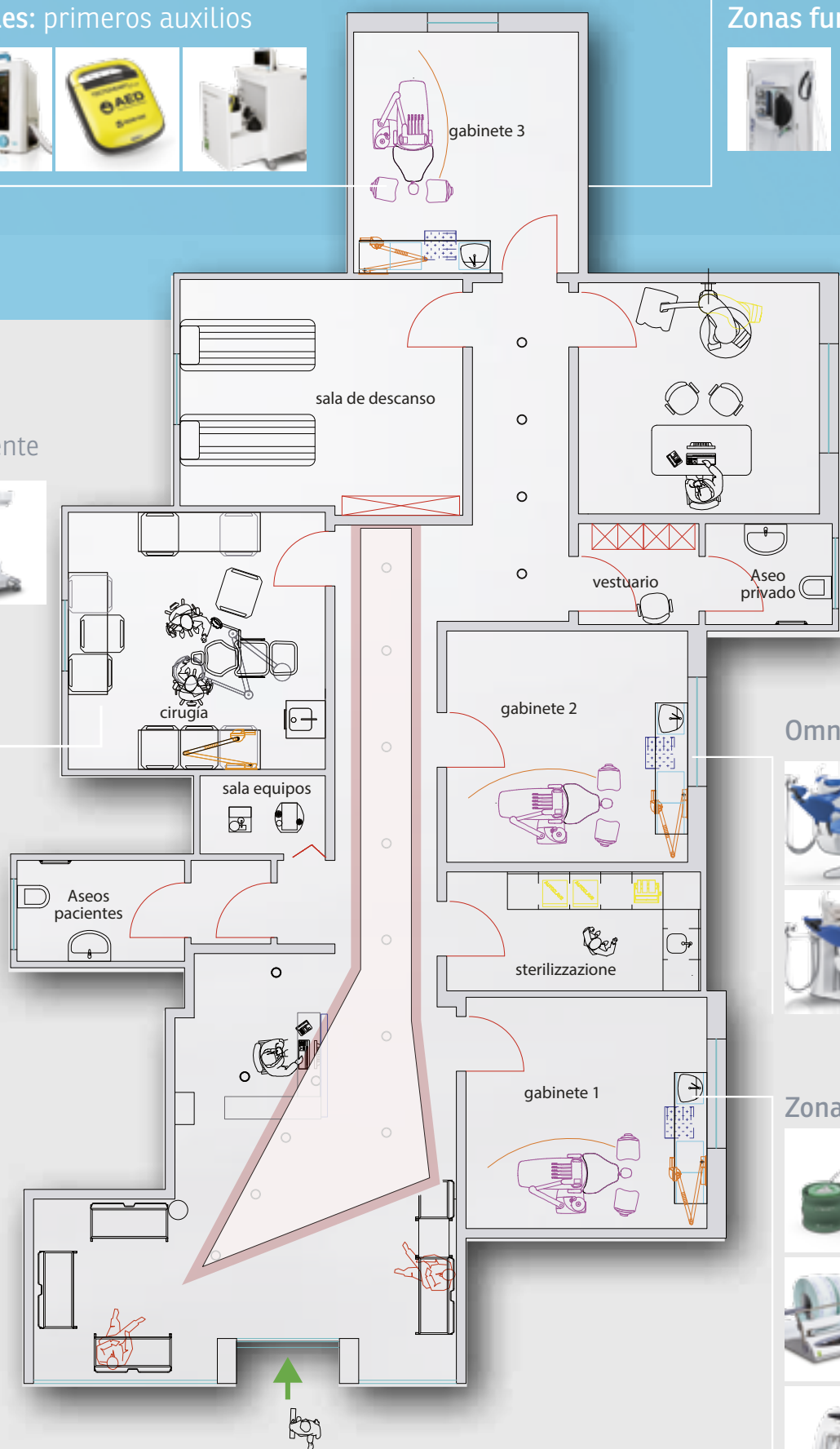

Omniprático: equipos dentales



Modelo B

Modelo L

Zonas funcionales: esterilización



ESTERILIZACIÓN

POCAS EMPRESAS COMO LA NUESTRA



Pocas empresas como **Tecno-Gaz** son capaces de proponer un **proyecto completo** que aborde todos los aspectos relacionados con la prevención del riesgo biológico en la clínica dental.



MÁS DE
106 000

AUTOCLAVES
VENDIDOS EN TODO
EL MUNDO



MÁS DE
5 000

CLÍNICAS
DENTALES
EQUIPADAS



1 000+

MILES DE
DENTISTAS
UTILIZAN
NUESTRAS
BAÑOS DE
ULTRASONIDOS

DESDE HACE MÁS DE
20 AÑOS

TECNO-GAZ ESCRIBE
LA HISTORIA DE
LA ESTERILIZACIÓN
EN EUROPA

MULTISTERIL CD

Líquido concentrado para la
desinfección y la limpieza



1

MULTISTERIL

Procedimiento totalmente automatizado: **desinfección, limpieza, enjuague y secado**. Seguridad, ahorro de tiempo y económico.

MULTISTERIL + MULTISTERIL CD

El primer sistema certificado que garantiza:

Limpieza certificada
Desinfección certificada
Integridad instrumental

DESINFECCIÓN

STAND-BY **NOVEDADES!**

LIMPIEZA POR
ULTRASONIDOS

VACIADO
AUTOMÁTICO

SECADO

1

2

3

4

5

DESEA UNA SOLUCIÓN RÁPIDA:

¡ADOPTÉ EL PROTOCOLO
TECNO-GAZ!
CON SOLO 3 APARATOS,
EL PROCESO DE
ESTERILIZACIÓN
MÁS RÁPIDO.

Optimización y racionalización de las cargas



BAÑO MULTIFUNCIÓN
MULTISTERIL



SELLADORA DE
BANDA CONTINUA
TECNOSEAL



AUTOCLAVE DE CLASE B
ONYXB



2

TECNOSEAL

SISTEMA DE TRACCIÓN AUTOMÁTICA POR
CÉLULA FOTOELÉCTRICA

PRODUCTIVIDAD Y
AHORRO ELEVADOS

TARJETA ELECTRÓNICA DE
CONTROL DE GESTIÓN Y
PARÁMETROS



3

ONYXB

GRAN CAPACIDAD
DE CARGA

CICLOS MÁS RÁPIDOS

TECNOLOGÍA INNOVADORA

FACILIDAD
DE USO



PROYECTO KYRI

Solución
quirúrgica
polivalente

El proyecto Kyri puede emplearse únicamente para la cirugía de implantes o configurarse para tratamientos odontológicos añadiendo un módulo móvil de instrumental y una escupidera.

Los módulos permiten configurar y modificar la disposición según las necesidades.



ERGOSEAT

Un dispositivo diseñado para garantizar una postura correcta gracias al sistema de compensación dinámica.



KYRI CART

Módulo de instrumental móvil con muchas posibilidades de configuración y una elevada flexibilidad funcional:

- Cinco espacios para el instrumental.
- Control de los parámetros del instrumental dinámico.
- Control de movimientos del sillón y memoria de posiciones.
- Altura variable para guardar bajo la superficie de trabajo.

Reposa cabeza orbital




Para trabajar mejor

El 70% de los implantes sustituyen a molares y premolares, lo que implica cirugía lateral. Una mejor postura y menor presión muscular para el paciente facilitan enormemente el trabajo del odontólogo.

KYRI WATER UNIT



El complemento ideal para sillón Kyri polivalente y multifuncional. Permite el control de la aspiración quirúrgica gracias al portacánulas equipado de dos cánulas. Kyri Water Unit es el elemento de convergencia entre la aspiración y el gabinete. La columna telescópica se adapta al mobiliario funcional y permite guardar Kyri Water Unit bajo la superficie de trabajo.

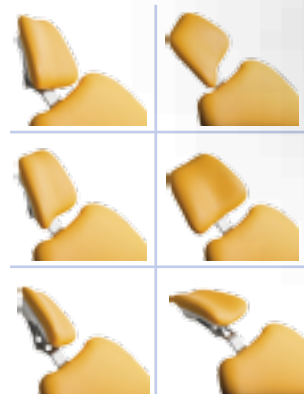

Infinitas posiciones en 5 ejes

Kyri le respalda en cualquier situación. Gracias a sus 5 ejes de movimiento, puede adoptar todas las posiciones convencionales, y también afrontar posiciones de emergencia en caso de situaciones imprevistas o insólitas.



Odontología



Ortopnoica o semisentada



Trendelemburg



Fowler



Mesa quirúrgica
Altura variable

Solución quirúrgica

ORION 40DS



Lámpara escáltica quirúrgica con sistema de iluminación indirecta patentado que garantiza un excelente dominio de las zonas sombreadas. Orion40DS propone dos tamaños de campo adaptados a las necesidades de la cirugía de implantes.

KYRI

Kyri es el único sillón quirúrgico diseñado y concebido específicamente para mejorar la ergonomía y la eficacia funcional en cirugía dental. Los 5 movimientos independientes son posibles gracias a los 4 motores que permiten adoptar todas las posiciones posibles y facilitan el trabajo del odontólogo a la vez que aumentan la comodidad del paciente. Se puede añadir un portacánulas con cánulas de aspiración y fijar en los raíles laterales numerosos accesorios como reposabrazos, ganchos de solución fisiológica o un soporte de apoyo para la técnica PRF.

SMART TROLLEY

La primera línea de muebles técnicos que permite mejorar la ergonomía y la eficacia de la práctica quirúrgica diaria. Una innovación real y una evolución del mobiliario dental.

80+

Más de 80
disposiciones
posibles



MESA PUENTE

La mesa es un mueble sencillo cuya posición en el espacio ergonómico común entre el médico y el auxiliar es estratégica y contribuye al éxito de la intervención quirúrgica.



KYRI DSS

Nueva aspiración quirúrgica con potencia regulable, doble recipiente, pedal de control y numerosos artículos desechables (bolsas, dispositivos flexibles y cánulas).



Un cliente comparte su experiencia con usted: Dr. Erwan Kerboeuf

El sector de la implantología experimenta un desarrollo importante y se universaliza en el seno de nuestra profesión. No obstante, es esencial respetar los protocolos rigurosos a fin de no poner en riesgo la asepsia de una intervención y garantizar así la osteointegración de los implantes y su durabilidad. Según las instituciones sanitarias, un gabinete adaptado es suficiente para la práctica de la implantología.

Sin embargo, se recomienda encarecidamente disponer de una sala específica si practicamos estas intervenciones de forma regular y seria. El interés de una sala de operaciones adaptada es una limpieza fácil y reproducible, la sencillez de la ergonomía, la facilidad de racionalización y de planificación, la elevada comodidad y la reducción del tiempo de preparación. El concepto Tecno-Gaz con su diseño

completo, modulable, apto para evolución y seguro satisface perfectamente las necesidades del odontólogo y de su equipo. Me agrada especialmente su ergonomía y su creatividad.

Dr. Erwan KERBOEUF
Cirujano dentista, implantólogo, Aubagne

Unidad instrumental móvil

KYRI CART



Kyri Cart ofrece numerosas posibilidades de personalización: **los 5 espacios para instrumentos permiten múltiples configuraciones.** La disposición de base (jeringa, turbina, motor y ultrasonidos) puede asociarse a un micromotor quirúrgico ya presente en la sala. **También se puede añadir a esta disposición un segundo micromotor asociado a una bomba peristáltica y obtener así una dotación de alto rendimiento.** Kyri Cart está fabricado con materiales nobles que resisten un uso intensivo. De fácil desinfección, la parte superior de cerámica puede utilizarse como soporte para el instrumental quirúrgico.

Pantalla de control

Panel de control con mandos touch muy intuitivos. **Control de las posiciones del sillón. 3 memorias de posición.** Control de los parámetros del micromotor eléctrico NSK Led Nano, velocidades, torque, etc.

Una configuración óptima

Jeringa, micromotor, turbina, ultrasonidos y espacio adicional para micromotor. Hasta 5 espacios **para una disposición libre del instrumental dinámico.**



Solución operativa

Asociado al Kyri, Kyri Cart permite **controlar los movimientos del sillón y memorizar hasta tres posiciones.**



Astas para porta solución fisiológica y **encimera de cerámica = Superficie solida** para apoyar un motor de cirugía independiente.

Sistema Clean Water Alimentación de agua:

Kyri Cart recibe el agua de una botella de 2 litros, volumen que equivale a una jornada de trabajo. También es posible conectarse directamente a la red de abastecimiento de agua.



Pedal de control

Pedal de control intuitivo para regular de forma sencilla las rotaciones y el spray.



Materiales nobles = Resistencia y Durabilidad

Kyri Cart está fabricado con materiales nobles que permiten un uso intensivo en la sala de operaciones. Fácil de desinfectar y su parte superior puede actuar de soporte quirúrgico.



Un dispositivo ideal

Muy compacto, con ruedas de 10 cm para facilitar el movimiento en espacios pequeños y altura variable que permite colocarlo bajo la superficie de trabajo junto a otros muebles móviles Smart Trolley.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE KYRI CART

Dimensions	500x500x800-900(a) mm
Peso	20 Kg
Fuente de electricidad	Voltaje: 230 V Frecuencia: 50/60 hZ
Fuente de aire	Presión: 36 x 101 (h) x 44 cm Consumo MAX N/ 80l/min.
Micromotor	NSK Nano Led NSK Nano Led Plus
Ultrasonidos	EMS SATELEC

La aspiración quirúrgica

KYRI DSS



Aspiración y Precisión

En las intervenciones quirúrgicas, cada elemento de la sala debe ofrecer el mayor rendimiento posible. En el caso de la cirugía de implantes, el sistema de aspiración adaptado Kyri DSS succionará con precisión la sangre, el tejido y los fragmentos de hueso y dentina gracias a su elevada depresión.



Funciones y Ergonomía de trabajo

La concentración del cirujano es clave para el éxito de la intervención. Todo el equipo clínico debe contar con un dispositivo eficaz y flexible, capaz de responder a las diferentes situaciones. Aspiración continua o a demanda y potencia ajustable. El cirujano puede activar la función que desee a través del pedal o el auxiliar lo hará directamente en la pantalla de control.



Higiene y Diseño

Tecno-Gaz prima la seguridad, la comodidad y la tranquilidad del paciente. Los bordes redondeados de Kyri DSS le proporcionan un aspecto agradable y reducen el grado de estrés. Su pequeño tamaño permite mantener el orden situándolo bajo la superficie de trabajo. Su diseño y la forma de las tapas permiten una fácil desinfección de toda la superficie. Finalmente, los productos desechables (bolsas, tubos flexibles y cánulas) están dispuestos de forma específica para evitar la contaminación cruzada.

La aspiración quirúrgica en implantología y cirugía dental

	Sistema "Switch"
	Pedal con doble función
	Sistema de recipientes de recuperación con bolsa
	Carro con ruedas deslizantes y freno de seguridad

- Volumen de aspiración ajustable hasta 90 l/min y alta depresión (900 mbar)**

La unidad de aspiración quirúrgica Kyri DSS satisface todas las necesidades quirúrgicas gracias a una tasa de aspiración de 90 l/min y una depresión elevada constante de hasta 900 mbar.

- Diseño elegante y compacto**

Permite guardarlo bajo la superficie de trabajo. Bordes redondeados para un aspecto elegante, discreto y aséptico.

- Bomba de alto rendimiento y muy silenciosa**

Con sus solo 46 dB de emisión de ruido, ocupa un lugar privilegiado en el mercado. El bajo nivel sonoro representa una ventaja añadida para el paciente, ya que reduce considerablemente las molestias. Además resulta muy cómodo tanto para el cirujano como para su equipo.



Gracias a un selector se desvía el flujo succionado al recipiente deseado y se garantiza un funcionamiento continuo.



Este sistema activa el control de la aspiración. Las dos posiciones disponibles permiten un uso continuo o la activación e interrupción a través del pedal, lo que garantiza un máximo control.



Gracias al sistema innovador de recipientes con bolsa desechable integrado y al grifo de seguridad, el operador no tiene contacto alguno con las secreciones, lo que garantiza una higiene y una facilidad uso sin igual.



Para una comodidad de uso y una integración ambidiestra máximas en el seno del gabinete dental.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE KYRI DSS

Tipología	Dispositivo médico de clase II A
Modelo	Kyri DSS
Fuente electricidad	230 V/50 Hz
Depresión	900 mBar
Aspiración	90 L/min
Peso	20 Kg
Dimensiones	36 x 101 x 44 cm
Emisión sonora	46 dB

Ver bien. *Ver mejor.*

Con una lámpara escialítica dental

Intensidad luminosa de hasta:
130.000 Lux

Para uso en clínica dental:
55.000 Lux

Temperatura de color:
4.500/5.000 K

Campo iluminado:
15 cm y 20 cm

Lámpara escialítica diseñada para la cirugía dental

¿Por qué una lámpara escialítica dental?

La iluminación debe garantizar que, durante la intervención, el cirujano recibe una información fiel a la realidad. Asimismo, debe emitir luz suficiente en todas las posiciones de la boca del paciente, especialmente, cuando adopta un ángulo de 45°.




Orion 40 DS

Techo
Art. LC102LRD

Pared
Art. LC101LRD

Otro soporte
Art. LC103LRD

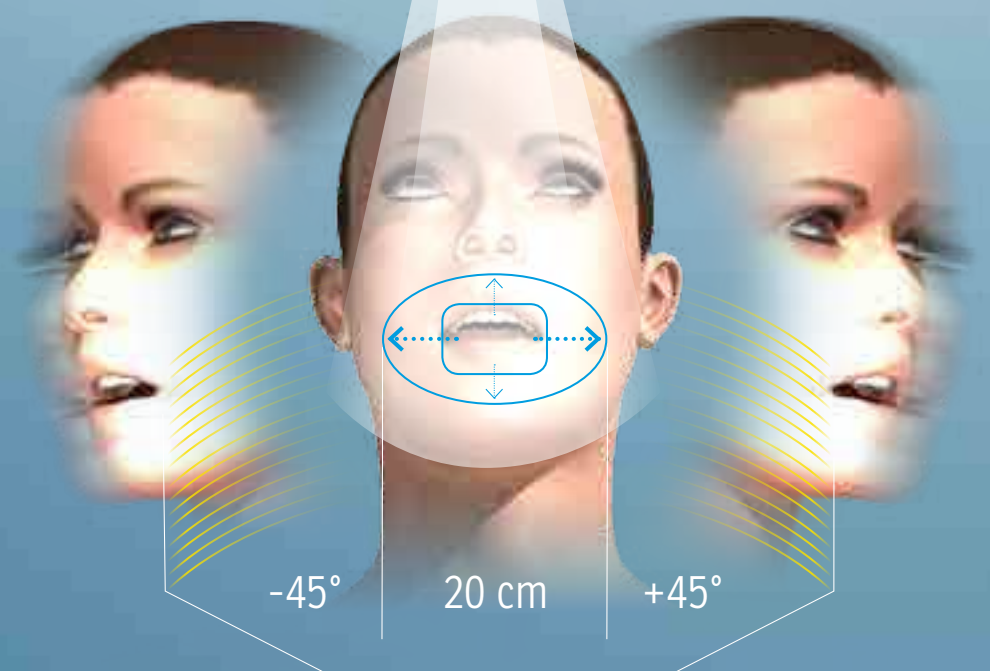

La iluminación tradicional puede causar daños visuales

Dado que la luz es la herramienta de la vista, es necesario tenerla en cuenta desde el inicio de la carrera de dentista y no cuando aparezcan los problemas.





Iluminación
parabólica
indirecta



Doble rango de iluminación

Los rangos de intensidad luminosa de la lámpara Orion 40DS cambian según las necesidades del trabajador:

- **Función E-Dental Light:** de 20.000 Lux a 55.000 Lux con función de lámpara de práctica general.
- **Función ORION Light:** de 40.000 Lux a 130.000 Lux con función de lámpara quirúrgica.

¡La única lámpara escialítica dental!

Orion 40DS es la primera lámpara escialítica diseñada específicamente para uso en clínica dental gracias al estudio de las limitaciones y las necesidades de este tipo de cirugía. Los campos de iluminación de 15 y 20 cm permiten iluminar todas las posiciones de la boca incluso con un ángulo de 45°. Dispone de una intensidad luminosa de 55.000 lux ideal para uso en clínica dental. Doble temperatura de color de 4.500 y 5.000 °K para distinguir los tejidos duros de los blandos. Orion 40DS concentra todas sus características y especificaciones y las adapta a la cirugía dental.

E-Dentalight

Esta función permite encender solo dos módulos de 6 LED y generar un campo iluminado de 15 cm con una intensidad luminosa de 55.000 Lux.

Luz fría

El aumento de la irradiación térmica en el campo de intervención es proporcional a la cantidad y la potencia de los LED empleados. Gracias a su concepto de luz indirecta, Tecno-Gaz utiliza un menor número de LED.

Orion 60



Intensidad luminosa:
130.000 Lux

Temperatura de color:
4.500/5.000 K

Diámetro exterior
del reflector:
Ø 630 mm

Orion 80



Intensidad luminosa:
130.000 Lux

Temperatura de color:
4.500/5.000 K

Diámetro exterior
del reflector:
Ø 630 mm

SMART TROLLEY

80+
Más de 80
disposiciones
posibles

Tecno-Gaz ha creado el concepto SMART TROLLEY y con ello ha cambiado lo que parecía inmutable. **SMART TROLLEY revoluciona el mobiliario dental y modifica completamente su función.** 'EL MOBILIARIO' ya no es solo un elemento visual estético y un armario para almacenar, se convierte en un dispositivo dinámico de organización y optimiza el orden y el tiempo de preparación. SMART TROLLEY ocupa un lugar esencial en la solución quirúrgica integrada.



Disposiciones
infinitas

HE LLEGADO EL
MOMENTO DE
TRANSFORMAR SU
GABINETE EN SALA
DE OPERACIONES



- ✓ Diseñados para un trabajo fácil y productivo
- ✓ Orden específico para sala quirúrgica
- ✓ Se adaptan a todos los gabinetes: fácil integración y configuración

El inicio de la intervención es un momento esencial para el paciente y el dentista, su éxito depende de la tranquilidad o la tensión del paciente y de la calidad y el desarrollo del proceso sanitario. Un entorno clínico acogedor favorece una actitud positiva en el paciente y garantiza al dentista una ergonomía de trabajo sin precedente.



Más las unidades
de trabajo

Distribuidor material
desechable



Lavabo



Se integran fácilmente y se puede
modificar su disposición

Es importante **acoger al paciente** en el gabinete sin producirle estrés ni tensión así como ofrecerle un entorno visual agradable que le permita superar los temores y miedos relacionados con el tratamiento dental. Líneas sencillas, ningún dispositivo voluminoso, orden, armonía, higiene y una percepción de máxima calidad.

Sencillez visual
Líneas puras

**Limpieza y
desinfección fáciles**

Máxima flexibilidad
para todas las intervenciones



Portainstrumentos dental plegable


Portainstrumentos con tres compartimentos plegables que permiten tener todo lo necesario al alcance de la mano con la ventaja de "ocultarlo" con un simple gesto.

Panel accesible para el cableado

Rueda para ajustar la inclinación de las baldas

Gancho para suero fisiológico

Smart Trolley médico-eléctrico con posibilidad de gancho para suero fisiológico. A su lado el carro quirúrgico de uso dinámico que pone todo a su disposición.

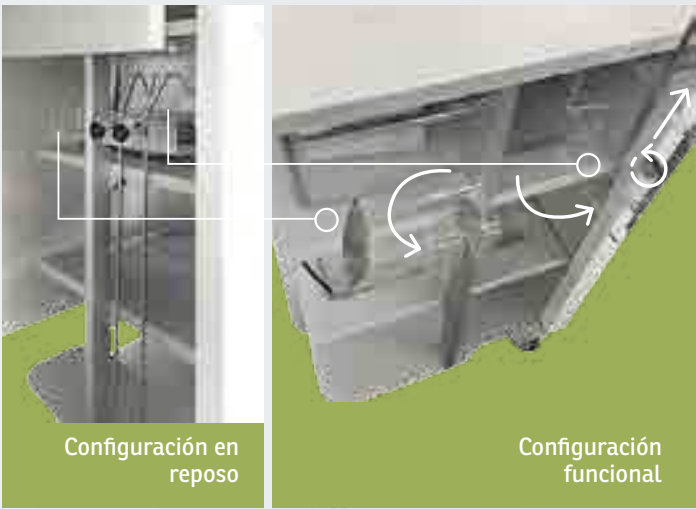

Smart Trolley
Preoperatorio



La sala de operaciones debe tener a disposición del dentista todo lo necesario de forma continua e independiente. Esto se logra gracias a Smart Trolley intraoperatorio que en modo inactivo almacena todo el material y una vez fuera de su box se convierte en un dispositivo funcional.

Guías HQ con cajón extraíble



Smart Trolley
Médico-eléctrico



La cantidad de instrumentos eléctricos empleados durante una intervención es considerable. La solución Smart Trolley Médico-Eléctrico, gracias a su sistema de suministro eléctrico centralizado, ofrece flexibilidad y posibilidad de almacenar los pedales de mando voluminosos y se transforma en un elemento funcional clave e indispensable.

Baldas orientables

Una mejor posición y un menor estrés muscular para el paciente significan más facilidad en la práctica de su trabajo.



Smart Trolley
Postoperatorio



Para facilitar el procesado de residuos y material contaminado así como optimizar el tiempo de preparación y el orden, hemos creado Smart Trolley Postoperatorio que, gracias a su baño de descontaminación integrado y a los compartimentos de reciclaje, representa la plataforma ideal de recuperación y reciclaje del material infectado.



NOVEDAD!

Mobiliario Técnico Profesional

SMART BLOX



DIFERENTES
DIPOSICIONES
POSIBLES



Los muebles que se pueden disponer según sus necesidades

Elija el KIT MEUBLES SMART BLOX, y decida si colocar el lavado a la izquierda o la derecha, si instalar todos los elementos bajo la superficie de trabajo o en una columna, si introducir también uno o varios elementos móviles, si fijar los elementos a la pared, sobre patas o si añadir una estructura protectora.



De nuevo,
Tecno-Gaz ha ideado
una solución para
ayudarle en la
organización
de su gabinete.



Mueble móvil con cajones

Mueble móvil
médico-eléctrico



UNIVERSAL Y MODULAR

Una pared, 2115 mm disponibles, es todo lo que se necesita para una solución completa Smart Blox. **Conciba su ergonomía con toda libertad.** Disponga los diferentes módulos Smart Blox para adaptarse a su ergonomía personal de trabajo.



MODULABLE


Organice el espacio según sus necesidades actuales y modifíquelo en el futuro si fuera necesario. Gracias a la lógica del sistema **Smart Blox 2115**, todos los elementos están diseñados para una disposición libre en todo momento.

SISTEMA
SMART BLOX
2115

DESFIBRILADOR

¿UNA OBLIGACIÓN?

Las obligaciones se perciben generalmente como limitaciones cuestionables para las cuales buscamos todas las interpretaciones posibles en función de nuestros intereses. Sin embargo, cuando se trata de dispositivos que salvan vidas hay olvidar el concepto de obligación y pensar en la ética y el sentido común. **Resulta evidente que cada equipo dental destinado a la práctica de intervenciones quirúrgicas invasivas debe disponer de dispositivos adaptados a los primeros auxilios del paciente en caso de una situación crítica. Por ello, el oxímetro de pulso, el oxígeno y el desfibrilador DEA constituyen instrumentos indispensables.**

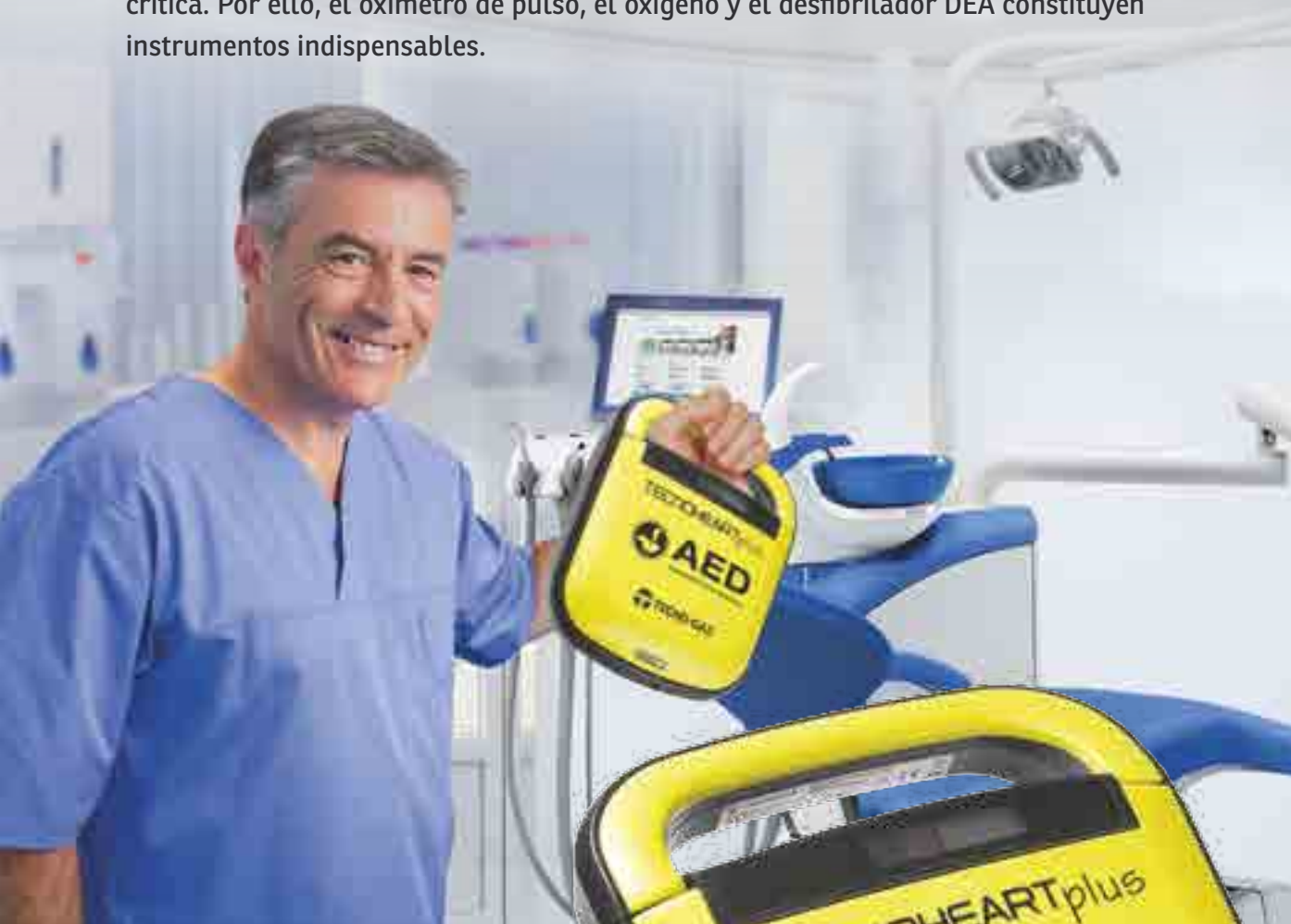

Los desfibriladores DEA son equipos diseñados para un uso general. El DEA realiza de forma automática el control y el diagnóstico y guía al usuario, mediante órdenes verbales, durante las fases de la urgencia. Se trata de un dispositivo obligatorio e indispensable para todos los gabinetes dentales.

Existen numerosos tipos de desfibriladores, por lo que la elección es complicada. Cuando se decide adquirir un dispositivo de primeros auxilios para salvar vidas, es necesario una sensibilidad especial y elegir el mejor.

TECNOHEART PLUS EL DESFIBRILADOR DE TECNO-GAZ

- **3 niveles de control y de autodiagnóstico** que garantizan una eficacia continua.
- **Electrodos siempre conectados y listos para usar**
- **Primera descarga asegurada**
- **Garantía integral 5 años**
- **Relación calidad precio sin igual**
- **Electrodos universales adulto / niño**
No es necesario comprar más electrodos caros y difíciles de conectar en el momento de la emergencia
- **Selector de potencia**
Energía emitida adulto/niño

TECNOHEART PLUS

TecnoHeart Plus efectúa todas las funciones de forma automática mientras informa al usuario de la función seleccionada. La decisión de emitir una descarga es automática, sin intervención del usuario, y le precede un mensaje verbal. Así se evitan retrasos, dudas y cada actividad excluye la intervención humana.



UN DESFIBRILADOR
CON PROPIEDADES
ÚNICAS

VITAL TEST

Oxímetro de pulso profesional, diseñado para uso en clínica dental.



E POINT

Unidad móvil de primeros auxilios.



MASTERFLUX PLUS

Nuevas mascarillas Intelliflux

Grande innovación en el campo de la sedación gracias a los **nuevos circuitos Intelliflux**, los únicos estudiados para:

- Evitar la dispersión del gas en el ambiente de la sala
- Garantizar la **estabilidad de la mascarilla** sobre la cara del paciente
- Mejorar la operatividad del dentista **evitando de interferir con sus gestos e instrumentos** gracias al sistema de fijación superior y no lateral y la posibilidad de orientar los tubos



Dispositivo Seguro

Siempre Concentración Mínima en Oxígeno

Siempre se eroga un mínimo de 30% de oxígeno, por lo tanto evitando cualquier riesgo de HIPOXIA o de ANOXIA.

Corte de N₂O

Dispositivo de seguridad que corta el suministro de N₂O cuando la presión de O₂ es inexistente.

Botón de Emergencia O₂

Al presionar el botón de O₂, se corta el suministro de N₂O, entregando 100% de oxígeno al paciente.

Válvula anti-retorno

Una válvula muy especial evita a los gases expulsados de regresar en los circuitos. Adicionalmente, un dispositivo especial permite al paciente respirar el aire ambiente en caso de fallo de suministro.

Control de flujo Automático

El sistema se ha diseñado para permitir un suministro rápido y fácil del flujo. Girando el botón del O₂, se selecciona la cantidad esperado en litros por minuto, según la capacidad respiratoria del paciente. El botón especial de regulación permite al porcentaje de suministro de óxido nitroso de variar desde 0 hasta 70%.

Las columnas que indican los flujos se diseñaron para una lectura fácil y rápida.

Las conexiones se colocaron detrás de la caja de control y sus conectores son físicamente distintos con el fin de prevenir el riesgo de una conexión de tubos de gases equivocada. De nuevo, una ulterior precaución que garantiza mayor seguridad del dispositivo.



El nuevo circuito

Ergonomía

- Permite trabajar a 4 manos.
- Conector orientador de los tubos del circuito por encima del cabeza del paciente (el conector se orienta liberando un amplio espacio de trabajo).



Tratamiento agradable

- El paciente sedado experimenta un estado de bienestar. Además la mascarilla amortiguada no deja ninguna marca en el rostro.
- Reposa frente y elástico en la nuca para estabilidad máxima.



Sedación rápida y eficiente

- Mascarilla que sella perfectamente y que se adapta perfectamente a cualquier forma de cara.



Ninguna dispersión de gas en el ambiente

Gracias a:

- Válvula anti retorno
- Conexión a la aspiración del equipo
- Nueva mascarilla que sella perfectamente

Las nuevas mascarillas

Ventajas nuevos circuitos y nuevas mascarillas:

- Ninguna dispersión de Gas en Ambiente.
- Mejor adaptación a cualquier tipo de rostro.
- Mas comodidad por el paciente y por el operador.

Hoy, con el nuevo circuito y las mascarillas adaptadoras, se alcanza **un mejor rendimiento logrando además un mejor control sobre el suministro de la mezcla de gases.**




Gama de sillones dentales TYGI



TYGI **B**

El sillón modelo B, con mecanismo de elevación tradicional mediante pantógrafo, garantiza un confort de trabajo óptimo. El diseño cónico de la base permite una práctica agradable para el personal y facilita los desplazamientos alrededor del sillón.

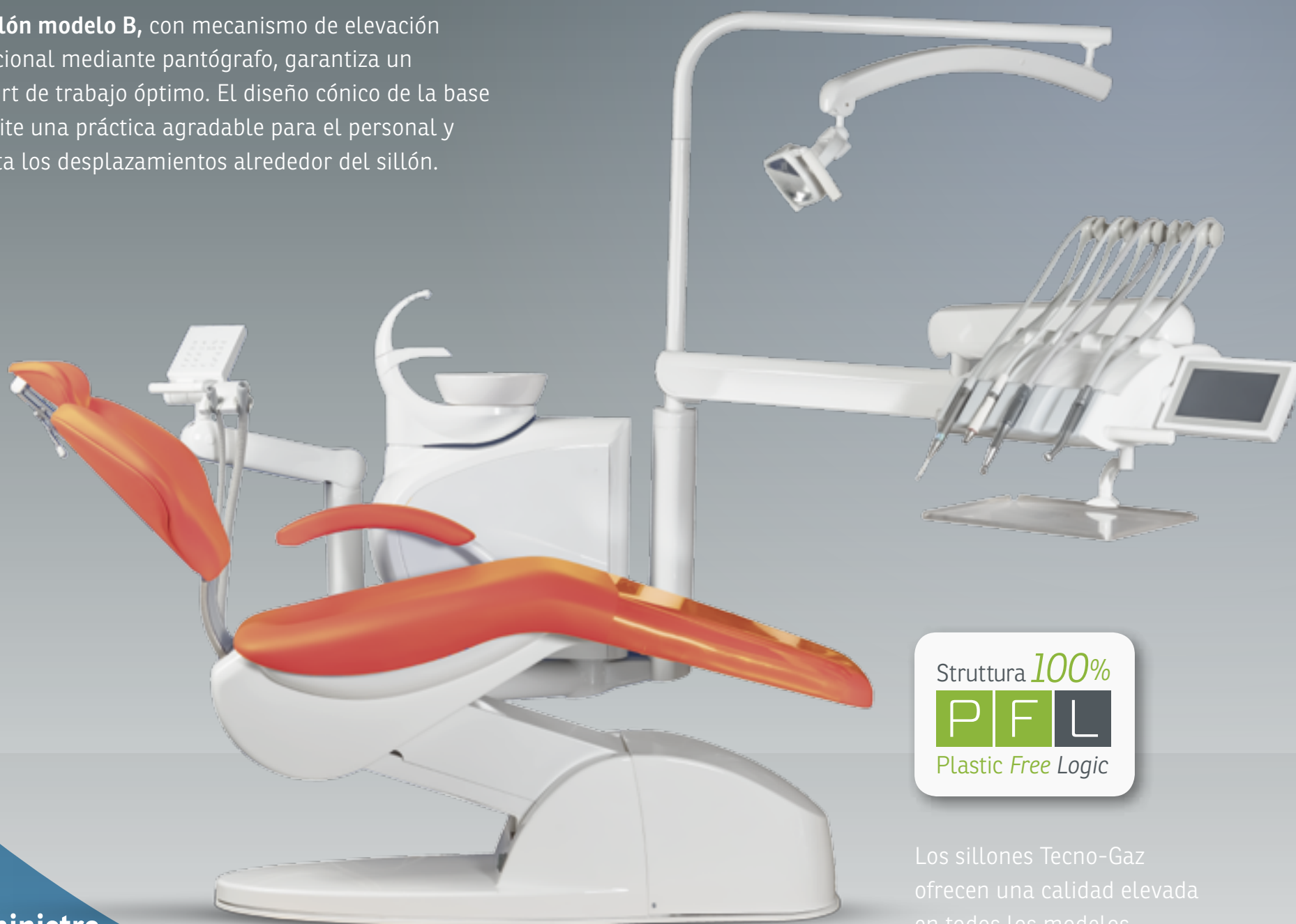

Struttura **100%**
P F L
Plastic Free Logic

Los sillones Tecno-Gaz ofrecen una calidad elevada en todos los modelos.

Suministro de serie sin compromiso:

- Lámpara de operación LED
- Reposabrazos izquierdo
- Sistema de desinfección de las mangueras
- Reposacabeza orbital
- Anticompresión abdominal
- Antidesvestimiento
- Asiento operador ortopédico
- 10 memorias
- Escupidera rotatoria
- Materiales nobles sin plástico
- Pedal multifunción
- 5 instrumentos mínimo
- Respaldo trasero tapizado



TYGI100B

TYGI100L

Al elegir un sillón se pueden considerar varios factores. Sin duda, encontrar el producto adecuado NEWS a sus necesidades resulta fundamental y no negociable. Los detalles marcan la diferencia y determinan la singularidad y la calidad. Siempre se apreciará la variedad para no tener que adaptarse y Tecno-Gaz le ofrece esta posibilidad. Para seleccionar el sillón se deben tener en cuenta las necesidades en materia de ergonomía y organización del trabajo. Por ello le ofrecemos la posibilidad de elegir la versión que mejor se adapte a sus necesidades.

TYGI^L

El modelo de sillón L con mecanismos de elevación vertical ofrece una accesibilidad extrema gracias a que ocupa un mínimo espacio en el suelo, lo que facilita la higiene, la asepsia y la limpieza.



TYGI 300
EVO B

TYGI 300
EVO L



TYGI 500
EVO B

TYGI 500
EVO L



¡Aproveche nuestras **atractivas ofertas comerciales!**

El **carácter complementario** de los equipos Tecno-Gaz le permite **satisfacer las necesidades de sus protocolos** y, al mismo tiempo, lograr un ahorro considerable.



Art. AB015ZXY

Onyx B 5.0

Autoclave para la esterilización de cargas de tipo B



Art. OI002NPU

Pura Plus

Dispositivo de ósmosis

PACK 1

Onyx B 5.0 +
Pura Plus =

Precio estándar

~~4.848€~~

Precio del Pack

3.990€

IMPUESTOS EXCLUIDOS



Art. AB012ZXZ

Onyx B 7.0

Autoclave para la esterilización de cargas de tipo B



Art. OI002NPU

Pura Plus

Dispositivo de ósmosis

PACK 2

Onyx B 7.0 +
Pura Plus =

Precio estándar

~~5.338€~~

Precio del Pack

4.490€

IMPUESTOS EXCLUIDOS





Art. AB017ZXZ

Onyx B 8.0

Autoclave para la esterilización de cargas de tipo B



Art. OI002NPU

Pura Plus

Dispositivo de ósmosis

PACK 3

**Onyx B 8.0 +
Pura Plus =**

Precio estándar

~~5.644€~~

Precio del Pack

4.590€

IMPUESTOS EXCLUIDOS



Art. AB015ZXY

Onyx B 5.0

Autoclave para la esterilización de cargas de tipo B



Art. 2200S

Multisteril

Baño multifunción

PACK 4

**Onyx B 5.0 +
Multisteril =**

Precio estándar

~~7.052€~~

Precio del Pack

5.790€


IMPUESTOS EXCLUIDOS



Art. 2200S

Multisteril

Baño multifunción



Art. DM401ALP
6 pcs.

Multisteril CD

Concentrado líquido para la limpieza y la desinfección

PACK 5

**Multisteril +
Multisteril CD =**

Precio estándar

~~3.318€~~

Precio del Pack

2.990€

IMPUESTOS EXCLUIDOS



Art.
TA001TAU

TecnoSeal

Selladora de banda continua

Art.
2110S

TecnoPrint

Impresora para trazabilidad

Art.
3ELNL0001

Lector Óptico

Lector óptico de código de barras

PACK 6

**TecnoSeal +
TecnoPrint +
Lector óptico =**

Precio estándar

~~2.987€~~

Precio del Pack

2.490€

IMPUESTOS EXCLUIDOS



Art.
2110S

TecnoPrint

Impresora para trazabilidad

Art.
3ELNL0001

Lector Óptico

Lector óptico de código de barras

PACK 7

**TecnoPrint +
Lector optico =**

Precio estándar

~~1.027€~~

Precio del Pack

890€

IMPUESTOS EXCLUIDOS



Art.
TA001TAU

TecnoSeal

Selladora de banda continua

PACK 8

TecnoSeal =

Precio estándar

~~1.690€~~

Precio del Pack

1.390€

IMPUESTOS EXCLUIDOS



Art.
LC102LRD

Orion 40 DS

Lámpara equipada
con tecnología LED



Art.
SA210ZSA

SterilAir Pro

Aparato de
esterilización de aire

PACK 9

**Orion 40DS +
SterilAir Plus**

Precio
estándar

~~8.066€~~

Precio del Pack

5.590€

IMPUESTOS EXCLUIDOS



Art. LC102LRD

Orion 40 DS

Lámpara equipada
con tecnología LED



Art. SA002ZSA

SterilAir Pro

Aparato de
esterilización de aire



Art. AC001ZB3

Kyri DSS

Sistema de
aspiración
quirúrgica

Art. SB1A314

40 Kits desechable

con tapa y cánulas

PACK 10

**Orion 40DS +
SterilAir Plus +
Kyri DSS + 40 bolsas**

Precio
estándar

~~9.966€~~

Precio del Pack

7.390€

IMPUESTOS EXCLUIDOS



Art. AC001ZB3

Kyri DSS

Sistema de
aspiración quirúrgica

Art. SB1A314

40 Kits desechable

con tapa y cánulas

PACK 11

**Kyri DSS +
40 bolsas**

Precio
estándar

~~2.490€~~

Precio del Pack

1.590€

IMPUESTOS EXCLUIDOS



Art. AE003Z12

TecnoHeart Plus

Desfibrilador semiautomático

Art. 11250

Vital Test

Oxímetro de pulso

PACK 12

TecnoHeart Plus + Vital Test =

Precio estándar

~~1.893€~~

Precio del Pack

1.590€

IMPUESTOS EXCLUIDOS

Art. LC102LRD

Orion 40 DS

Lámpara equipada con tecnología LED



Art. PC101POC

Kyri

Sillón quirúrgico con pedal inalámbrico



SALA DE OPERACIONES INTEGRADA PARA UNA **ERGONOMÍA DE TRABAJO PERFECTA**

Art. MO001STY

Smart Trolley médico-eléctrico



Art. SD999SED + muestrario en el pedido

ErgoSeat

Asiento ortopédico profesional



PACK 13

- Orion 40 DS +
- Kyri +
- Smart Trolley Médico-eléctrico +
- ErgoSeat =

Precio estándar

~~18.853€~~

Precio del Pack

13.990€

IMPUESTOS EXCLUIDOS



Art. PC101POC

Kyri

Sillón quirúrgico con pedal inalámbrico



Art. LC102LRD

Orion 40 DS

Lámpara equipada con tecnología LED



SALA DE OPERACIONES INTEGRADA
PARA UNA **ERGONOMÍA**
DE TRABAJO PERFECTA

Art. MO001STY+MO002STY+MO003ST

Smart Trolley

Conjunto de 3 Smart Trolley,
médico-eléctrico, intra y post

Art. SD999SED +
muestrario en el pedido

ErgoSeat

Asiento ortopédico profesional



Art. MO004STY

Station Parking para Smart Trolley

Preoperatorio Médico-eléctrico Posoperatorio



PACK 14

- Orion 40 DS +
- Kyri +
- ErgoSeat +
- 3 SmartTrolleys +
- Station Parking
para Smart Trolley

Precio estándar ~~22.891€~~

Precio del Pack

16.990€

IMPUESTOS EXCLUIDOS

PACK 15

- Orion 40 DS + Kyri +
- ErgoSeat + 3 Smart
Trolleys + Station Parking
para Smart Trolley +
- Mesa Puente + Kyri DSS

Precio estándar ~~25.471€~~

Precio del Pack

18.900€

IMPUESTOS EXCLUIDOS

Bundle 14 + Mesa Puente + Kyri DSS

Mesa Puente



Art. AC001ZB3

Kyri DSS

Sistema de
aspiración
quirúrgica





Art. PC101POC

Kyri

Sillón quirúrgico con pedal inalámbrico



Art. LC102LRD

Orion 40 DS

Lámpara equipada con tecnología LED



SALA DE OPERACIONES INTEGRADA
PARA UNA **ERGONOMÍA
DE TRABAJO PERFECTA**

Art. M0001STY+M0002STY+M0003ST

Smart Trolley

Conjunto de 3 Smart Trolley,
médico-eléctrico, intra y post

Art. M0004STY

Station Parking para
Smart Trolley

Preoperatorio Médico-eléctrico Posoperatorio



Art. SD999SED +
muestrario en el pedido

ErgoSeat

Asiento ortopédico
profesional



Mesa
Puente



Art. AC001ZB3

Kyri DSS

Dispositivo para
la aspiración
quirúrgica



PACK 16

- Orion 40 DS +
- Kyri +
- Table Pont +
- ErgoSeat +
- 3 SmartTrolleys +
- Station Parking para
Smart Trolley +
- Kyri Cart con jeringa 3F,
turbina, contra ángulo NSK
nano y ultrasonidos Satelec

Precio estándar ~~29.887€~~

Precio del Pack

22.900€

IMPUESTOS EXCLUIDOS

Art. CA001K01+
CA801K01+
CA803K01+
CA804K01+
CA805K01

Kyri Cart

con jeringa 3F,
turbina,
contra ángulo
NSK nano y
ultrasonidos
Satelec





PACK 17

- **MasterFlux Plus** +
- **Extra Kit** Mascarillas Intelliflux Tamaño S & M + Circuito +
- **Extra Kit** Mascarillas Intelliflux Tamaño XXS & XS + Circuito +
- **Kit de componentes mono uso** =

Precio estándar

~~5.402€~~

Precio del Pack

3.990€

IMPUESTOS EXCLUIDOS



Art. 1600AS

MasterFlux Plus

Aparato para la sedación

Extra Kit Mascarillas Intelliflux Tamaño S & M + Circuito



Art. MF820ZMF

Circuito

Art. MF821ZMF

Mascarilla
Tamaño S

Art. MF822ZMF

Mascarilla
Tamaño M

Extra Kit Mascarillas Intelliflux Tamaño XXS & XS + Circuito



Art. MF820ZMF

Circuito

Art. MF836ZMF

Mascarilla
Tamaño XXS

Art. MF835ZMF

Mascarilla
Tamaño XS

Art.

2ZMFA0047+2ZMFA0048+2ZMFA0049

Kit de componentes mono uso

PACK 18

- **MasterFlux Plus** +
- **TecnoHeart Plus** +
- **Vital Test** =

Precio estándar

~~6.293€~~

Precio del Pack

5.490€

IMPUESTOS EXCLUIDOS



Art. 1600AS

MasterFlux Plus

Aparato para la sedación



Art.
AE003Z12

TecnoHeart Plus

Desfibrilador semiautomático



Art. 11250

Vital Test

Pulsioxímetro



Extra Kit Mascarillas Intelliflux
Tamaño S & M + Circuito



Art. MF820ZMF
Circuito



Art. MF821ZMF
Mascarilla
Tamaño S



Art. MF822ZMF
Mascarilla
Tamaño M

Extra Kit Mascarillas Intelliflux
Tamaño XXS & XS + Circuito



Art. MF820ZMF
Circuito



Art. MF836ZMF
Mascarilla
Tamaño XXS



Art. MF835ZMF
Mascarilla
Tamaño XS



Nuevo

Mascarillas
XS-XXS

XXS



XS



PACK 19

- **Extra Kit** Mascarillas Intelliflux
Tamaño S & M + Circuito +
- **Extra Kit** Mascarillas Intelliflux
Tamaño XXS & XS + Circuito +
- **Kit de componentes
mono uso** =

Precio
estándar

~~2.046€~~

Precio del Pack

1.390€

IMPUESTOS EXCLUIDOS

Art.
2ZMFA0047+2ZMFA0048+2ZMFA0049

**Kit de componentes
mono uso**

Frontal silicona



Tamaño S, M, L
borde mascarilla silicona

